


PaxView® STI12 MPCR-ULFA Kit


Rilevazione e Identificazione Simultanea di 12 patogeni STI (malattie sessualmente trasmissibili)

Il kit PaxView® STI12 MPCR-ULFA è un kit diagnostico in vitro progettato per la rilevazione e l'identificazione di 12 IST (infezioni a trasmissione sessuale) in campioni di urina umana e tamponi vaginali mediante MPCR-ULFA (Multiplex PCR e Universal Lateral Flow Assay).

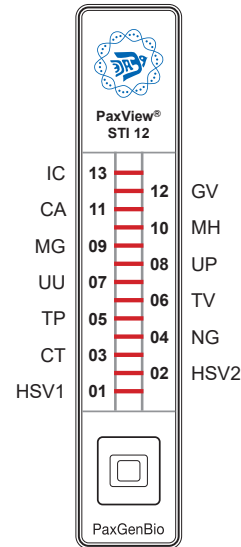

G. vaginalis
C. albicans
M. hominis
M. genitalium
U. parvum
U. urealyticum
T. vaginalis
T. pallidum
N. gonorrhoeae
C. trachomatis
HSV2
HSV1

Patogeni Target

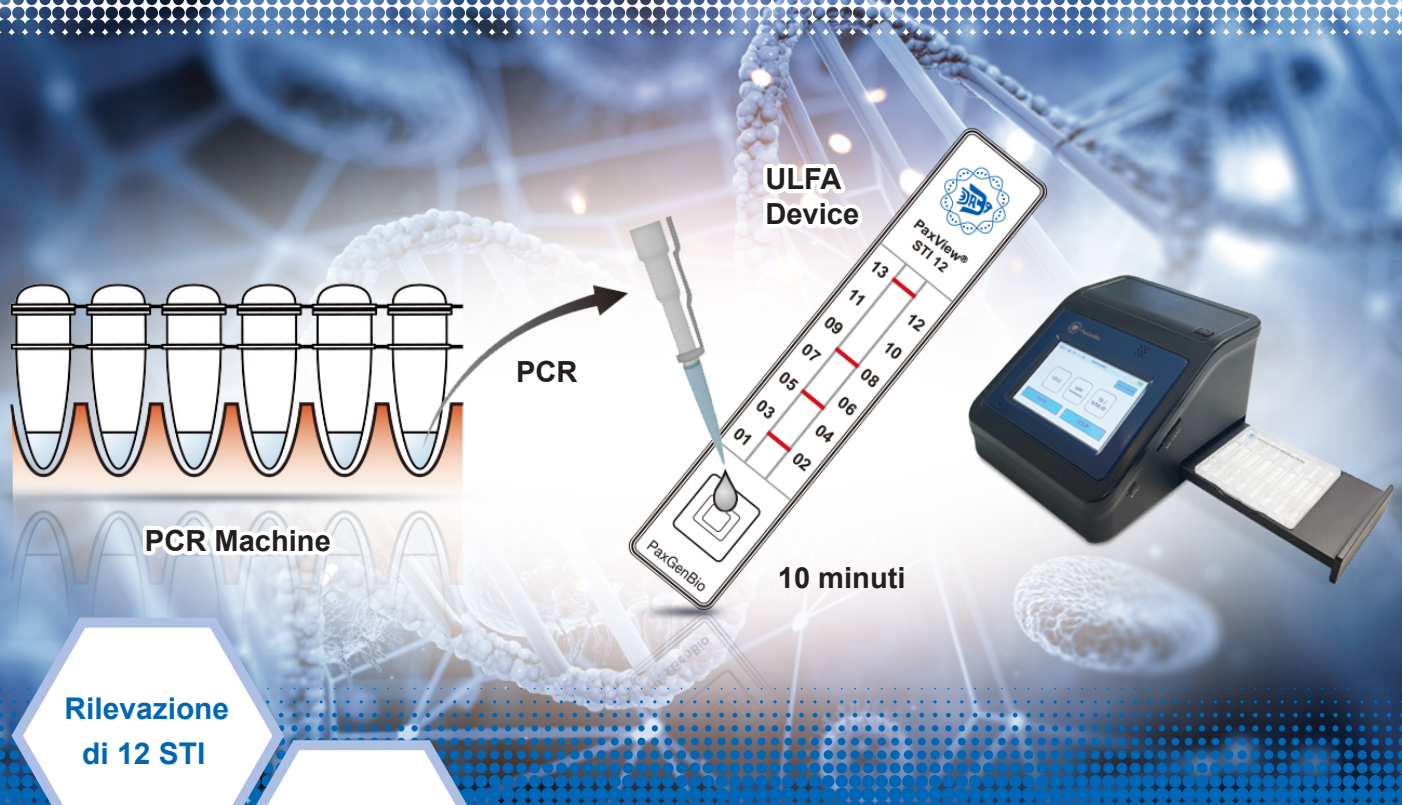

Rilevazione di 12 STI

Utilizzo Semplice

Costi Effettivi

U.S. Patent Registered

■ Caratteristiche e Vantaggi

- Rilevazione Multiplex PCR di 12 STIs con un singolo dosaggio
- Utilizzo di qualsiasi termociclatore
- Utilizzo semplice e lettura fino a 8 cartridge con ULFA Reader
- Risultati ULFA in 10 minuti
- Nessuna contaminazione o carry-over

Il kit PaxView® STI12 MPCR-ULFA utilizza la tecnologia proprietaria di PaxGenBio. I primer della PCR che amplificano i geni bersaglio includono la sequenza nucleotidica complementare alla sonda universale immobilizzata sulla membrana NC. L'ibridazione DNA-DNA tra la sonda e la sua sequenza complementare di un'estremità dei prodotti della PCR con analisi a flusso laterale consente il rilevamento dei geni bersaglio.

— PaxView® STI12 MPCR-ULFA Kit




— PaxView® ULFA Lettore



L'analizzatore può leggere fino a 8-cartridge simultaneamente

— Interpretazione

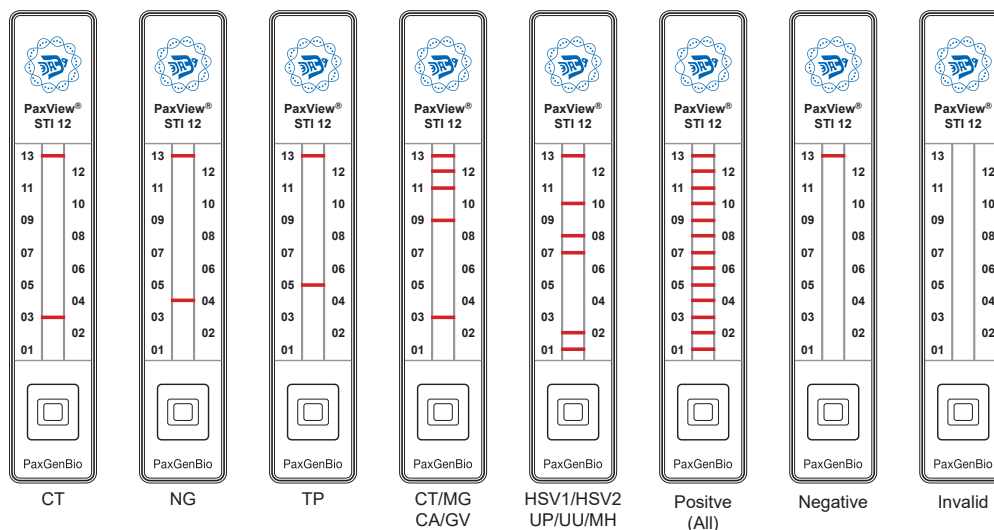

— Informazioni per Ordini

Prodotto	PaxView® STI12 MPCR-ULFA Kit
Confezione	96 tests/kit
Codice	V0212N
Conservazione	MPCR: -25 ~ -15°C, ULFA: 15 ~ 30°C
Emivita	12 mesi